

iOLA

PORTABLE SKIN CARE KIT



아침 햇살처럼 환하게! 피부 속부터 빛이 납니다.

마음까지 아름다워지는 피부과학 이올라



이올라의 세부명칭

- 1 이온/진동 출력부
ION/VIBRATION HEAD
- 2 전원버튼(⊕)
POWER
- 3 스텝버튼(STEP)
STEP BUTTON
- 4 모드버튼(MODE)
이온/레이저(ION/LASER) 선택버튼
MODE(ION/LASER) BUTTON
- 5 세기버튼(L/H) 강/중/약
(LOW/HIGH) BUTTON

- 6 손쪽 이온칩
HAND ION CHIP
- 7 클렌징(C)단계, 마사지(M)단계, 영양공급(N)단계, 리프팅(L)단계
미백관리(W)단계, 주름관리(W)단계 표시램프
CLEANSING, MASSAGE, NUTRIENT,
LIFTING, WHITENING, WRINKLE CARE LAMP
- 8 레이저
LASER
- 9 적외선 램프
INFRARED LAMP




- 1 BATTERY CHARGE LAMP
충전용 램프
- 2 AUTOMATIC RECHARGING SYSTEM
배터리 충전기

- 본체 사양
172(H)×54(W)×55(T)mm, 약 155g
사용전압 DC 3.7V, 700mA (Li-ion)
- 충전기 사양
85(H)×80(W)×82(T)mm, 약 113g
전원 AC 100~240V 50/60Hz


버튼 사용방법

버튼을 누르는 횟수에 따라 사용모드가 바뀝니다.


▶ 스텝버튼(STEP)

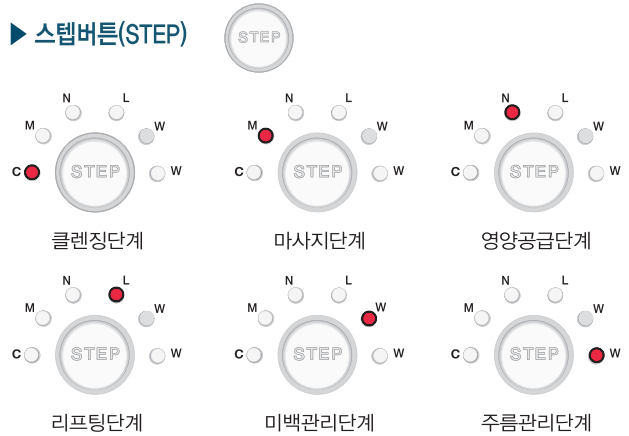

▶ 모드버튼(MODE)

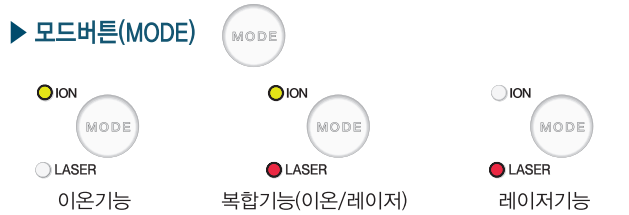

▶ 세기버튼(L/H)

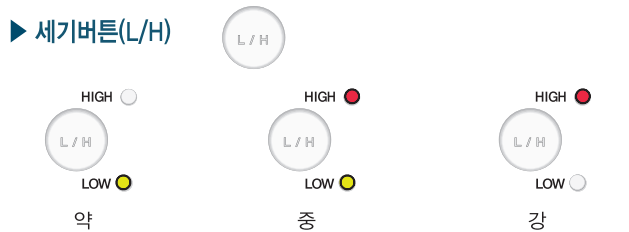




Freshness

평금영글...
괴일처럼 싱그럽고 탄력있게 거듭됩니다



피부에 대한 기초 이해

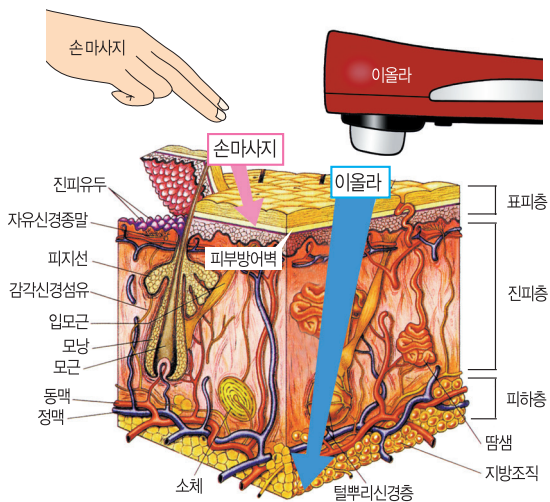

우리의 피부 조직은 제일 위층에 있는 **표피층**과 섬유질로 되어있는 **진피층** 지방을 함유하고 있는 **피하조직** 층으로 이루어져 있습니다.

이러한 피부 조직은 28일을 주기로 지속적으로 재생되고 있으며 표피층 중간에 있는 피부방어벽이 외부의 환경과 물질로부터 피부를 보호하고 있습니다. 그러나 피부 보호 측면에서 피부방어벽은 영양성분의 공급을 가로막는 부정적인 면도 있습니다.

현대용 피부관리기 '이올라'는 갈바닉이온과 레이저 적외선 진동기능을 동시에 이용하여 피지와 각질 노폐물을 관리하고, 기능성화장품의 수용성 물질을 표피 뿐 아니라 진피까지 전달하여 건강한 피부를 가꿀 수 있도록 도움을 드립니다.

Purity

꽃피하게...
피부가 티없이 맑고 순수해집니다





이올라의 4가지 기능

▶ 갈바닉이온 기능

안전하게 정류된 전류로서 양극(+극)과 음극(-극)의 두 극을 이용하여 모공속 피지와 각질 노폐물을 관리하고 화장품의 수용성 물질을 표피뿐 아니라 진피까지 전달하여 탄력 있고 깨끗한 피부를 가꾸는데 도움을 드립니다.

▶ 적외선 기능


적외선 기능이 건강하고 생기 있는 피부로 가꾸는데 도움을 드립니다.

▶ 레이저 기능

레이저는 빛을 증폭해서 한 점으로 나오게 하는 것으로 에너지를 가진 일정한 파장의 레이저 광선이 피부에 도달하여 피부를 가꾸는데 도움을 드립니다.

▶ 진동 기능

물리적 진동이 근육수축 이완작용에 도움을 주어 건강하고 탄력 있는 피부로 가꾸어 드립니다.



피부타입별 사용법

정상, 건성피부 사용법


※피부관리를 할때 복합기능(이온/레이저) 으로 사용하시는게 더 효과적입니다.

※관리 Tip


- 이어지게 문질러 주는 표시
- 3초 정도 머무른 후 옆으로 옮겨가는 표시



1단계-클렌징(C)단계

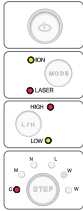

1. 화장을 하셨다면 평소와 같이 손으로 클렌징 제품을 이용하여 화장을 지우고 세안을 합니다.
2. 맨얼굴에 휘올라클렌징 젤 로션 크림을 얼굴에 골고루 퍼 바릅니다.
3. 전원버튼(⊙)을 누른 후 모드버튼(MODE)을 눌러 이온(ION)과 레이저(LASER)에 둘 다 불이 들어오도록 선택합니다.
4. 세기버튼(L/H)을 눌러 강, 중, 약 세기를 선택합니다.
5. 스텝버튼(STEP)을 눌러 C(클렌징)를 선택한 후 본체 양 옆의 이온침을 가볍게 잡고 자연스럽게 얼굴을 마사지 한 후 세안합니다.

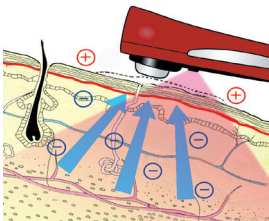

클렌징(C)단계 효과


양이온과 레이저 적외선 진동 기능이 클렌징제품의 효과를 배가시켜 피부의 노폐물(피지 각종 화장품찌꺼기 등)을 제거 하여 모공수축과 깨끗한 피부로 가꾸는데 도움을 줍니다.



2단계-마사지(M)단계



1. 마사지 젤이나 마사지 로션을 얼굴 전체에 골고루 퍼바릅니다.
2. 스텝버튼(STEP)을 눌러 M(마사지)을 선택합니다.
3. 본체 양 옆의 이온침을 가볍게 잡고 자연스럽게 1회(4분)마사지 한 후 스팀타일로 지압하듯 닦아 줍니다.

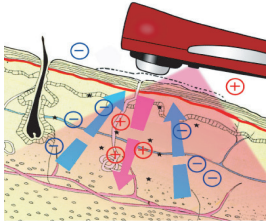

마사지(M)단계 효과


양이온과 음이온 레이저 적외선 진동 기능이 마사지제품의 효과를 배가시켜 모공수축 이완작용과 수분공급 작용으로 촉촉하고 탄력 있는 피부를 가꾸는데 도움을 줍니다.



3단계-영양공급(N)단계



1. 스킨 에센스 아이크림 영양크림을 얼굴 전체에 골고루 퍼바릅니다.
2. 스텝버튼(STEP)을 눌러 N(영양공급)을 선택합니다.
3. 본체 양 옆의 이온침을 가볍게 잡고 얼굴 전체를 마사지 합니다.

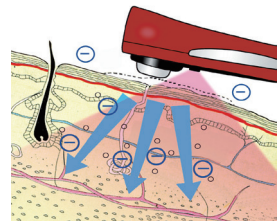


영양공급(N)단계 효과

음이온과 레이저 적외선 진동 기능이 고성능 에센스 또는 엠플 영양크림의 유효성분을 잘 흡수 되도록 도와 맑고 촉촉한 피부를 가꾸는데 도움을 줍니다.

- ※ 클렌징(C)단계와 마사지(M)단계를 관리한 후 젖은 타월로 닦거나 세안한 후 기초화장품(스킨, 에센스, 앰플, 영양크림, 아이크림 또는 미백 기능성 제품, 주름 기능성 제품 등)을 얼굴에 바르고 영양공급(N)단계~주름관리(W)단계까지 이어서 관리해도 됩니다.
- ※ 비타민C마스크시트지나 수분마스크시트지를 이용할 때에는 영양공급(N)단계~주름관리(W)단계까지 마스크시트지 위로 관리하고 시트지를 떼어낸 후 기초화장품(스킨, 에센스, 앰플, 영양크림 등)을 얼굴에 바른 후 마무리합니다.




4단계-리프팅(L)단계

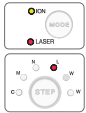

1. (영양공급)으로 관리한 후 얼굴을 닦지 말고 스텝버튼(STEP)을 눌러 L(리프팅)을 선택합니다.
2. 본체 양 옆의 이온침을 가볍게 잡고 늘어진 턱선과 입가를 집중적으로 마사지 합니다.

※ 진동기능은 작동되지 않습니다.

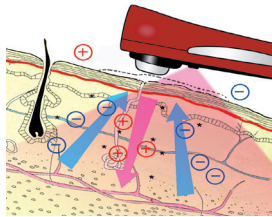

리프팅(L)단계 효과

양이온과 음이온 레이저 적외선 기능이 리프팅 제품의 효과를 배가시켜 늘어진 피부를 탄력 있고 탱탱한 피부로 가꾸는데 도움을 줍니다.




5단계-미백관리(W)단계



1. 미백 기능성 화장품 (비타민C 에센스 또는 앰플)을 얼굴에 펴 바릅니다.
2. 스텝버튼(STEP)을 눌러 W(미백관리)를 선택합니다.
3. 본체 양 옆의 이온침을 가볍게 잡고 자연스럽게 마사지 합니다.

※기미나 잡티가 있는 부분을 조금 더 마사지 해주세요.

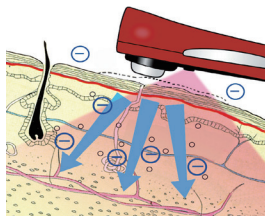

미백관리(W)단계 효과


음이온과 레이저 적외선 진동 기능이 미백제품의 유효성분을 잘 흡수 되도록 도와 기미나 잡티를 흐리게 하고 맑고 투명한 피부를 가꾸는데 도움을 줍니다.



6단계-주름관리(W)단계



1. 눈가 입가 등 주름이 있는 곳에 주름 기능성 화장품을 바릅니다. (아이크림 레티놀 또는 링클제움)
2. 스텝버튼(STEP)을 눌러 W(주름관리)를 선택합니다.
3. 본체 양 옆의 이온침을 가볍게 잡고 주름의 반대 방향으로 마사지 해준 후 마무리 합니다.

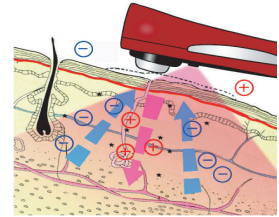

주름관리(W)단계 효과

양이온과 음이온 레이저 적외선 진동 기능이 아이크림이나 주름제품의 유효성분을 잘 흡수 되도록 도와 주름관리에 도움을 주고 탱탱하고 탄력 있는 피부를 가꾸는데 도움을 줍니다.

피부타입별 사용법

복합성피부 사용법


※ 피부관리를 할때 복합기능(이온/레이저) 으로 사용하시는게 더 효과적입니다.

※관리 Tip


- 이어지게 문질러 주는 표시
- 3초 정도 머무른 후 옆으로 옮겨가는 표시



1단계-클렌징(C)단계

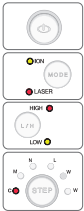

1. 화장을 하셨다면 평소와 같이 손으로 클렌징 제품을 이용하여 화장을 지우고 세안을 합니다.
2. 맨얼굴에 휘올라젤클렌징 젤 로션 크림을 얼굴에 골고루 퍼 바릅니다.
3. 전원버튼(ON)을 누른 후 모드버튼(MODE)을 눌러 이온(ION)과 레이저(LASER)에 둘 다 힘이 들어오도록 선택합니다.
4. 세기버튼(L/H)을 눌러 강, 중, 약 세기를 선택합니다.
5. 스텝버튼(STEP)을 눌러 C(클렌징)를 선택한 후 본체 양 옆의 이온집을 가볍게 잡고 자연스럽게 얼굴을 2회(8분)마사지 한 후 세안합니다.

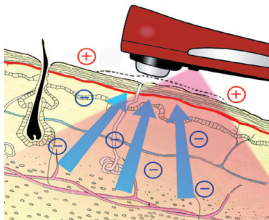

클렌징(C)단계 효과


양이온과 레이저 적외선 진동 기능이 클렌징제품의 효과를 배가시켜 피부의 노폐물(피지, 각질, 화장찌꺼기 등)을 제거하여 모공수축과 깨끗한 피부로 가꾸는데 도움을 줍니다.



2단계-마사지(M)단계



1. 마사지 젤이나 마사지 로션을 얼굴 전체에 골고루 퍼바릅니다.
2. 스텝버튼(STEP)을 눌러 M(마사지)을 선택합니다.
3. 본체 양 옆의 이온집을 가볍게 잡고 자연스럽게 1회(4분)마사지 한 후 스텝타월로 지압하듯 닦아 줍니다.

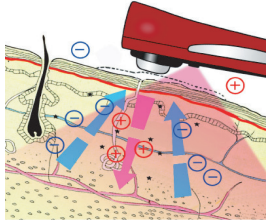


마사지(M)단계 효과


양이온과 음이온 레이저 적외선 진동 기능이 마사지제품의 효과를 배가시켜 모공수축, 이완작용과 수분공급 작용으로 촉촉하고 탄력 있는 피부를 가꾸는데 도움을 줍니다.



3단계-영양공급(N)단계 ~ 6단계-주름관리(W)단계

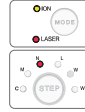

1. 비타민C 마스크시트지나 수분마스크 시트지를 얼굴에 덮어 씌웁니다.
2. 스텝버튼(STEP)을 눌러 N(영양공급)을 선택하여 마스크시트지 위로 자연스럽게 1회(4분) 마사지 합니다.
3. N(영양공급)단계가 끝나면 L(리프팅) ~ W(주름관리)까지 이어서 마사지한 후 시트지를 떼어냅니다.
4. 에센스 앰플 수분(영양)크림 등을 얼굴에 손으로 바르고 마무리 한 후
5. 모드버튼(MODE)을 눌러 레이저(LASER)를 선택한 다음 스텝버튼(STEP)을 누르고 관리하고자 하는 부위에 레이저를 조사합니다.

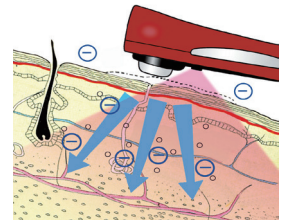

영양공급(N)단계~주름관리(W)단계 효과

양이온과 음이온 레이저 적외선 진동 기능이 마스크시트지의 성분을 극대화하여 수분과 보습을 전달하고 맑고 촉촉한 피부를 가꾸는데 도움을 줍니다.

지성피부 사용법


※ 피부관리를 할때 복합기능(이온/레이저) 으로 사용하시는게 더 효과적입니다.



1단계-클렌징(C)단계



1. 화장을 하셨다면 평소와 같이 손으로 클렌징 제품을 이용하여 화장을 지우고 세안을 합니다.
2. 맨얼굴에 휘올라젤클렌징 젤 로션 크림을 얼굴에 골고루 펴 바릅니다.
3. 전원버튼(O)을 누른 후 모드버튼(MODE)을 눌러 이온(ION)과 레이저(LASER)에 둘 다 불이 들어오도록 선택합니다.
4. 세기버튼(L/H)을 눌러 강, 중, 약 세기를 선택합니다.
5. 스텝버튼(STEP)을 눌러 C(클렌징)를 선택한 후 본체 양 옆의 이온칩을 가볍게 짚고 자연스럽게 얼굴을 3회(12분)마사지 한 후 세안합니다.

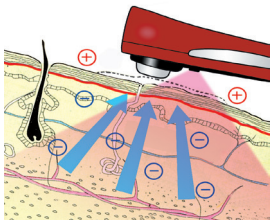

클렌징(C)단계 효과

양이온과 레이저 적외선 진동 기능이 클렌징제품의 효과를 배가시켜 피부의 노폐물(피지 각질 화장찌꺼기 등)을 제거하여 모공수축과 깨끗한 피부로 가꾸는데 도움을 줍니다.

※관리 Tip


- 이어지게 문질러 주는 표시
- 3초 정도 머무른 후 옆으로 옮겨가는 표시



3단계-영양공급(N)단계 ~ 6단계-주름관리(W)단계



1. 비타민C마스크시트지나 수분마스크 시트지를 얼굴에 덮어 씌웁니다.
2. 스텝버튼(STEP)을 눌러 N(영양공급)을 선택하여 마스크시트지 위로 자연스럽게 1회(4분) 마사지 합니다.
3. N(영양공급)단계가 끝나면 L(리프팅)~W(주름관리)까지 이어져 마사지한 후 시트지를 떼어냅니다.
4. 에센스 앰플 수분(영양)크림 등을 얼굴에 손으로 바르고 마무리 한 후
5. 모드버튼(MODE)을 눌러 레이저(LASER)를 선택한 다음 스텝버튼(STEP)을 누르고 관리하고자 하는 부위에 레이저를 조사합니다.

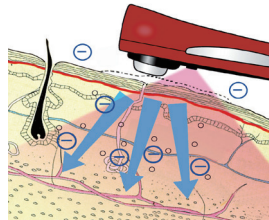

영양공급(N)단계~주름관리(W)단계 효과

양이온과 음이온 레이저 적외선 진동 기능이 마스크시트지의 성분을 극대화하여 수분과 보습을 전달하고 맑고 촉촉한 피부를 가꾸는데 도움을 줍니다.

레이저 기능만 사용할 경우

이율라의 전원버튼(Ⓞ)을 누릅니다. 모드버튼(MODE)을 눌러 레이저(LASER)로 선택하고 세기버튼(L/H)을 눌러 강(HIGH)을 선택한 다음 스텝버튼(STEP)을 눌러 C를 선택하여 레이저를 관리하고자 하는 부위에 조사합니다.

선택1 ▶ 기초화장품만 바르고 레이저 기능을 사용할 경우

- ① 세안 후 스킨으로 얼굴을 정돈하고 에센스 앰플 등을 손으로 적당량 바릅니다.
- ② 이율라의 전원버튼(Ⓞ)을 누릅니다.
- ③ 모드버튼(MODE)을 눌러 레이저(LASER)로 선택하고
- ④ 세기버튼(L/H)을 눌러 강(HIGH)을 선택한 다음
- ⑤ 스텝버튼(STEP)을 눌러 C를 선택한 후 관리하고자 하는 부위에 조사해 줍니다.

선택2 ▶ 클렌징단계 관리 후 레이저 기능을 사용할 경우

- ① 복합성피부는 클렌징단계 2회(8분사용)후 지성피부는 클렌징단계 3회(12분사용)후 폼클렌징으로 세안을 해줍니다.
- ② 세안 후 스킨으로 얼굴을 정돈하고 에센스 앰플 등을 손으로 적당량 바르고
- ③ 이율라의 전원버튼(Ⓞ)을 누릅니다.
- ④ 모드버튼(MODE)을 눌러 레이저(LASER)로 선택하고 세기버튼(L/H)을 눌러 강(HIGH)을 선택한 다음 스텝버튼(STEP)을 눌러 C를 선택한 후 관리하고자 하는 부위에 조사해 줍니다.

선택3 ▶ 피부타입별 관리 후 레이저 기능을 사용할 경우

피부타입별 사용법에 맞게 관리해준 후 선택1을 이어서 관리해 줍니다.



피부 관리시 주의사항

- 자주 묻는 질문을 자세히 읽은 후 사용하십시오.
- 사용 전에 모든 귀금속은 제거하고 사용하십시오.
- 이올라는 피부 접촉이 있어야 작동됩니다.
- 이올라로 A가 B에게 마사지 해 줄 때는 A가 오른손에 이올라를 들고 왼손은 B의 피부 즉 얼굴이나 손 등 상대방의 피부와 접촉되어야 기능이 작동됩니다.
- 피부염 환자는 사용하지 마시고, 알레르기 피부 등 특이 체질은 사용하실 때 주의를 하시고 의사와 상담 후 사용하시기 바랍니다.
- 사용 중 얼굴이 붉어지거나 가려움 화농성 염증이 반복되어 나타나는 경우에는 관리를 중단 하시고 전문 상담원의 상담을 받으십시오.
- 13세 이하의 어린이는 사용하지 마십시오.

레이저 관리시 주의사항



- 레이저 광선을 눈에 직접 조사하지 마십시오.
- 얼굴 관리시 눈두덩이 에는 레이저를 조사하지 마십시오.
- 사용 시 최대한 피부 가까이 밀착시켜 천천히 골고루 레이저를 조사하십시오.
- 레이저 조사 시간은 한 부위에 16분 정도 하십시오.
- 레이저 조사를 하는 곳에는 반사될 수 있는 거울이나 시계 등의 물체를 피해주십시오.
- 임신부는 얼굴관리만 사용하시고 배부 위는 관리하지 마십시오.



Clearness


만약만족...
유리처럼 투명하고 화사해집니다



제품 관리 및 충전방법

- 이올라는 물로 세척하지 마시고 물티슈 및 젖은 타월로 관리해주시고 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.
- 이올라의 전원버튼(⏻)을 끈 상태에서 충전기에 올려놓고 충전기에 **빨간불**이 들어오는지 확인하십시오.
- 충전이 완료되면 녹색불로 바뀝니다.
- 충전에 이상이 있을 경우 충전기에 빨간 불이 깜빡거립니다.
- 완전 방전된 상태에서는 3시간 이상 충전해 주십시오.
- 완충전 되면 약 3시간 30분 동안 연속 사용이 가능합니다.
- **충전 잔량을 확인할 때에는 전원버튼(⏻)을 누른 후 스텝(STEP)버튼을 5초간 누르고 단계별(C M N L W W) LED 램프를 확인합니다.**
 - LED램프의 6단계가 전부 켜지면 ➡ 만 충전 표시
 - 배터리 잔량이 부족할 시에는 “삐릭삐릭” 부저음이 울림 ➡ 재충전 요망
- 각 단계의 사용은 4분입니다. 4분이 지나면 “삐리리”하는 부저음과 함께 대기상태가 되며 대기 상태에서 4분 동안 작동하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 충전 전압은 100V~240V 입니다.
- 충전이 완료된 후에는 충전기 코드를 빼놓으십시오.
- 충전기 단자는 이물질이 닿지 않게 해주시고 먼지나 이물질이 묻지 않게 닦아주십시오.

■ 충전 잔량 확인 방법

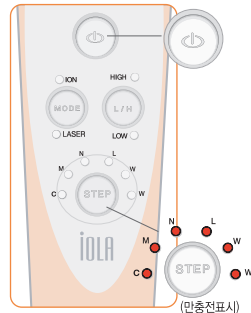

기술이 다른 기업, 믿을 수 있는 (주)로츠

(주)로츠는 다릅니다

피부건강과 생명력을 위해 탄생한
이올라는 첨단 피부과학을 이용하여
가장 자연스럽게 아름다워지는
피부를 추구합니다.

최첨단 기술의 전문 피부관리기
이올라는 이미 세계의 권위 있는
학회지에 게재되어 그 뛰어난 과학성을
입증 받았으며 국내외 각종
품질인증마크를 획득하여 믿을 수 있는
제품임을 인정받았습니다.



이올라의 효과적인 사용법

- 이올라로 피부관리를 할 때에는 **모드버튼(MODE)**을 눌러 **이온/레이저(ION/LASER)**를 둘 다 선택하여 **복합기능**으로 관리하시면 더욱 효과적입니다.
- 사용 중 나타나는 **따끔거림**은 **정상적인 이온반응**이며 피부 건강 상태에 따라 느껴지지 않을 수도 있습니다.
- 따끔거림이 너무 심하시거나 싫으신 분은 세기버튼(L/H)을 눌러 약(LOW)으로 하거나 화장품을 충분히 바른 후 사용하십시오.
- **진동이 싫으신 분**은 세기버튼(L/H)을 5초 정도 누른 후 진동이 꺼진 뒤에 사용하십시오.
- 눈 밑은 피부가 얇고 민감하므로 3초 정도 머무른 후(1회 진동정도) 옆으로 옮겨가며 관리하십시오.
- 각 단계별 사용 시 뒷면의 LED램프 불이 깜빡거리는 것은 기능이 작동 중임을 나타내는 표시입니다.
- **건강 정상 피부**는 피부 타입에 맞춰 **주 3~4회** 관리하십시오.
- **민감성 피부**는 피부 타입에 맞춰 **주 2~3회** 관리하십시오.
- 관리 후 피부에 이상 반응이 없으면 매일 관리해도 됩니다.
- **기미 잡티 주름**이 있으신 분은 3단계(N)~6단계(W) 관리시 미백기능성제품이나 비타민C제품 주름기능성제품을 바르고 **조금 더** 관리하십시오.
- 피부관리는 취침 전에 하는 것이 가장 도움이 됩니다.
- 이올라의 리프팅(L)단계는 진동이 작동되지 않습니다.
- 각 단계가 끝나면 이올라를 티슈나 타월로 깨끗이 닦아 보관하십시오.



Fragrancy

달콤하게 ...
부드럽고 상큼한 피부가 향기롭습니다



세계가 주목한 (주)로츠의 기술력

맑고 투명하며 건강하고 아름다운 피부! (주)로츠는 끊임없는 연구개발을 거듭해온 결과 이올라를 탄생시켰습니다. 이올라는 이온기능과 레이저기능 적외선기능 진동기능을 이용하여 피부관리를 할 수 있으며 레이저기능만 선택하여 관리할 수도 있는 무선 충전식 피부 관리기입니다. 첨단 과학기술로 탄생한 피부관리기 이올라는 세계 여성들이 꿈꾸는 건강하고 아름다운 피부를 위해 끊임없이 노력할 것을 약속드립니다.

임상테스트 실시

일본 히로시마 현립대학 생물자원학부, 메이세이대학 이공학부 화학과 연구실, 한국 세명대학교 한방바이오산업 임상지원센터에서 실시한 임상시험 결과 (주)로츠의 제품으로 피부관리를 했을 경우 손으로 피부관리를 했을 때 보다 흡수가 더 잘 되는 것으로 나타났으며 **비타민C, 비타민A, 레티놀이 표피뿐 아니라 진피까지 침투되는 것을 입증**하였습니다. 즉 피지 각질 노폐물 관리에서 영양공급 리프팅 미백 주름관리에 이르기 까지 모든 단계가 간편하고 확실하게 이루어진다는 사실이 과학적으로 입증되었습니다.

미국, 일본, 영국 학회지에 소개된 피부관리기

(주)로츠의 피부관리기는 미국 2003년·2005년 MOLECULAR STRUCTURE 2건, 일본 6건, 영국 1건 (총 9건) 피부전문학회지에 게재되었고, 2009년 독일 TOP브랜드와 100대 혁신상을 수상했으며, 2010년 유럽피안 비즈니스 어워드를 수상했습니다.

세계 여성들의 피부가 꿈꾸는 과학





(주)로츠의 인증 및 특허실적



- 특허등록증 제 047922호
- 특허등록증 제 0500100호
- 특허등록증 제 0500911호
- 특허등록증 제 0507453호
- 특허등록증 제 10-1169675호
- 중국등록증 등록 ZL 2003 8 0110348.0
- 중국등록증 등록 ZL 2003 8 0110349.0
- 일본특허증 등록 4359593호
- 일본특허증 등록 4431536호
- 미국특허증 등록 US 7,922,675 B2
- 미국특허증 등록 US 8,591,437 B2
- 미국특허증 등록 US 8,595,619 B2
- 유럽특허증 등록 2471453호

- 일본 히로시마현립대학 주관 이온도입 이온도출 초음파 도입 이온과 초음파 동시작용효과 임상실험 완료
- 일본 메이세이대학 주관 이온도입 이온도출 초음파도입 이온과 초음파 동시작용효과 임상실험 완료
- 2008년 10월 한림대 강동성심병원 임상실험 완료(이올라)
- 2008년 11월 한양대 구리병원 임상실험 완료(이올라)
- 한국 세명대학교 임상 테스트 완료
- ISO 9001:2008 획득
- 한국 건지재 시험 연구원(적외선 테스트 완료)
- 중소기업 중앙회 PL보험 1억 배상보험
- 우수산업디자인 상품 선정

- 2002년 일본 FRAGRANCE JOURNAL 게재(2건)
- 2003년 일본 FRAGRANCE JOURNAL 게재
- 2003년 일본 피부 보호와 바이오 기술 게재
- 2003년 영국 ICAVS-2 학회지 게재
- 2003년 미국 MOLECULAR STRUCTURE JOURNAL 게재
- 2004년 일본 '젊어지기의 실제' 미용저널 게재
- 2005년 미국 MOLECULAR STRUCTURE JOURNAL 게재
- 2005년 일본 피부전문 학회지 게재
- 2008년 독일 TOP브랜드 수상(메르비)
- 2008년 독일 100대 혁신상 수상(메르비)
- 2010년 유럽피안 비즈니스 어워드 수상(메르비)
- 2013년 대한민국 대표 우수기업 인증(매경닷컴)



UL마크 획득



위생안전제품질마크 획득

HS마크

생활환경 시험연구원에서
인민성에 대한 인격적인 감사
에 합리적인 재품유용 제공
위해 배상책임보험 가입으로
보상이 보장됩니다.



CE마크 획득

RoHS

RoHS마크 획득



FCC마크 획득



전기안전마크 획득

The leader in portable skin care kit

Lotts

주 로츠 서울특별시 강남구 삼성로 96길 6 엘지트윈텔 1차 10층 1005호
전화: 02-565-7500(代) 팩스: 02-561-1472 소비자상담실: 02-565-8787
공장: 대전광역시 유성구 테크노8로 69
www.lotts.co.kr E-mail:lotts@lotts.co.kr